

Steckbrief

Antigen-Schnelltest

Sie können dieses Dokument ausdrucken und bearbeiten oder digital ausfüllen. In diesem Fall vergessen Sie bitte nicht, das Dokument zu **speichern**, bevor Sie den Kurs verlassen.

Anwendungsgebiete / Wann sollte der Test angewendet werden?


Der Test soll nur bei Personen angewendet werden, die keinen bekannten Kontakt zu einem COVID-19 Fall hatten und keine Symptome zeigen.

Ziel ist, infizierte Personen zu erkennen, die schon ansteckend sein können, aber noch keine Symptome haben müssen.

Die Verlässlichkeit des Ergebnisses ist zwar hoch, aber nicht zu 100% sicher, da es falsch positive als auch falsch negative Ergebnisse geben kann. Sie ist auch abhängig von der korrekten Abnahme-Technik.

Ein negativer-Test besagt nicht, dass keine Infektion vorliegt, sondern nur, dass keine Infektion erkannt wurde.

D.h. die Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten. Ein positiver-Test ist durch einen PCR-Test zu bestätigen und dem Gesundheitsamt zu melden (ggf. über Ihren Hausarzt).

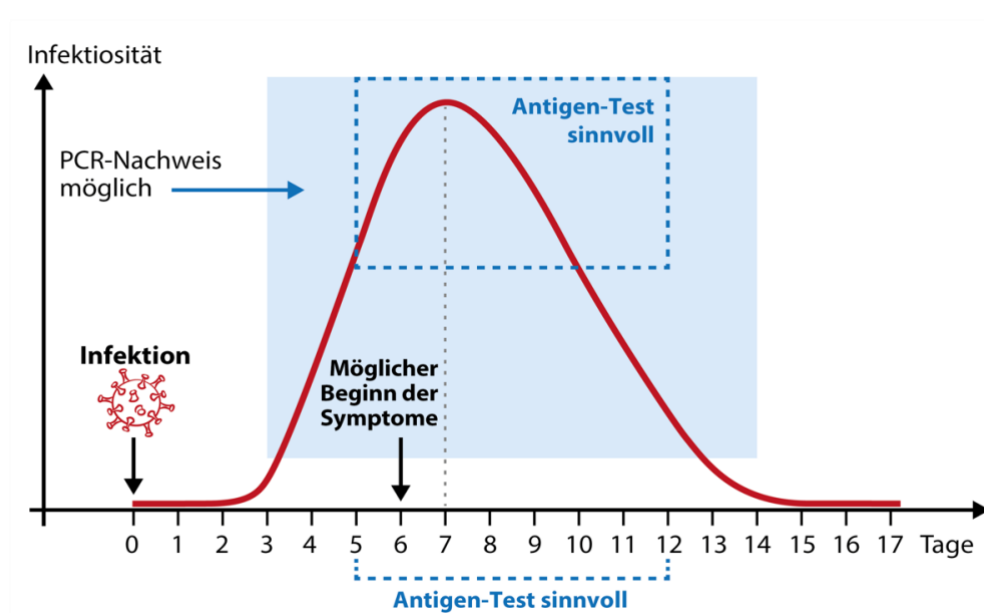

Anleitung zum Antigen-Schnelltest

Die Anleitung soll bei der konkreten Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Tests unterstützen. Vor Ort können die Abläufe abweichen. Die Vorgaben des Datenschutzes sind zu beachten.

Klären Sie den zu Testenden über die Abläufe auf und gehen Sie behutsam vor.

Vorbereitung

Schutzausrüstung anlegen:

- Mind. FFP 2 Maske
- Schutzbrille
- Kopfhaut
- Schutzkittel
- Doppelt Handschuhe



Test-Kit vorbereiten:

- Bei Raumtemperatur
- genaue Anleitung des Herstellers beachten,
- da es Unterschiede geben kann



Testutensilien bereitstellen:

- Röhrchen Ständer
- Extraktionsröhrchen
- Fläschchen mit Pufferlösung
- Verschlusskappen





Datenblatt vorbereiten:

In der Spalte mit der Testkassette doppelseitiges Klebeband verwenden. Auf dieses wird die Testkassette geklebt. Hierdurch kann sie nicht verrutschen und der Test ist eindeutig zuzuordnen. Datenblatt aus Datenschutzgründen nicht einsehbar aufbewahren.

Durchführung

1. Extraktionsröhrchen mit der Pufferlösung befüllen
2. Das Extraktionsröhrchen in den Röhrchenständer stellen
3. Leicht seitlich vom zu Testenden stehen (ab jetzt dazu sagen, was Sie machen)
4. Kopf des Patienten um 45-70° nach Hinten neigen
5. Tupfer durch das Nasenloch parallel zum Gaumen einführen (Der Abstrich sollte eine Tiefe erreichen, die dem Abstand von den Nasenlöchern bis zur äußeren Öffnung des Ohres entspricht). Es sollte ein federnder Widerstand zu spüren sein = (Rachenwand). Nichts erzwingen; bei Widerstand Nasenloch wechseln)
6. Tupfer 3-4x vorsichtig reiben und drehen
7. Tupfer in rotierender Bewegung langsam entfernen
8. Tupfer in das Extraktionsröhrchen geben
9. Die Tupferspitze in der Pufferlösung fünfmal drehen
10. Dabei mind. 5x gegen die Wand des Röhrchens drücken
11. Dann Tupfer im Röhrchen ausdrücken
12. Tupferstab abbrechen
13. Röhrchen verschließen
14. Untere Kappe (Dosieröffnung) öffnen
15. Fünf Tropfen senkrecht in die Probenvertiefung der Testkassette (Teststreifen) geben
16. Testkassette nicht bewegen
17. Teströhrchen entsorgen (siehe Punkt 19.)
18. Ergebnis nach 15 bis maximal 20 Minuten ablesen

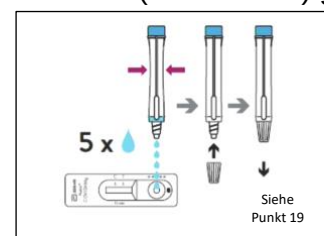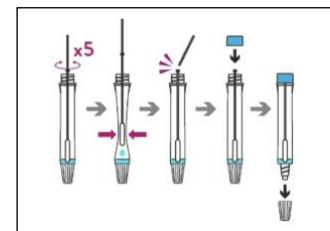

19. Hinweise zur Entsorgung:

Die benutzten Test-Utensilien müssen Sie anschließend sicher entsorgen. Beachten Sie vor allem beim Durchführen von Selbsttests folgende Hinweise:


- In privaten Haushalten müssen die Abfälle in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken gesammelt und fest verknotet werden.
Flüssige Abfälle sollten Sie mit saugfähigem Material, zum Beispiel Küchenrolle, umwickeln. Die Abfälle sind dann in der Restmülltonne zu entsorgen.
- In KiTas, Schulen, Unternehmen und anderen Einrichtungen, in denen größere Mengen anfallen, müssen Abfälle, die bei den Selbsttests anfallen, unter dem Abfallschlüssel 18 01 04 eingestuft und in dickwandigen Müllsäcken gesammelt werden.
 - Die Extraktionspufferröhrchen müssen zusammen mit saugendem Material zusätzlich in stabile verschließbare Behälter gegeben werden, so dass austretende Flüssigkeit aufgefangen wird.
 - Die Abfälle können dann in einem gemeinsamen Container unter dem Abfallschlüssel 18 01 04 bereitgestellt und abgeholt werden.

Beachten Sie: Möglicherweise gelten je nach Bundesland unterschiedliche Bestimmungen.

[Weitere Hinweise zu Entsorgung von Abfällen, die im Rahmen von Corona-Schnelltests anfallen \(Baden-Württemberg\)](#)

Auswertung

- Ist die Kontrolllinie (C), aber keine Testlinie (T) zu sehen, also nur eine Linie, ist der Test negativ.
- Ist die Kontrolllinie (C) und die Testlinie (T) zu sehen, also zwei Linien, ist der Test positiv.
- Ist keine Linie zu sehen, ist der Test ungültig und zu wiederholen.
- Wie stark oder schwach und in welcher Reihenfolge die Linien erscheinen ist unwichtig.

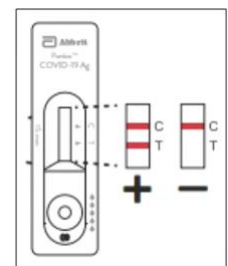

Haben Sie den Test selbst durchgeführt, nehmen Sie **bei einem positiven Ergebnis direkt Kontakt mit Ihrem Hausarzt und dem Gesundheitsamt auf**. Verhalten Sie sich ab sofort so, wie als wären Sie sicher infiziert und bleiben Sie zu Hause, ohne Kontakte. Ein PCR-Test wird das Ergebnis bestätigen oder widerlegen.

Ein negatives Ergebnis darf nicht dazu führen, dass Sie sich in Sicherheit wiegen. **Sie könnten infiziert sein**, aber durch dieses Testverfahren kann eine frühe Infektion nicht ermittelt werden. **Die Hygieneregeln sind weiterhin anzuwenden.**

Aufgabe

Bringen Sie die ausgefüllte Aufgabe mit in die Schulung.

Sie nehmen den Test bei einer Person ab, diese bekommt Nasenbluten.

Wie reagieren Sie?
